

EM 70
Wireless

beurer
medical



EM 70 Digital TENS/EMS mit Fernbedienung



TENS
technology

Transkutane elektrische
Nervenstimulation (TENS)



EMS
technology

Elektrische Muskelstimulation (EMS)



remote
control

Inklusive Fernbedienung
zur Steuerung

PAIN
free

german
engineering



Funktionen:

Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS) zur medikamenten- und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung, Elektrische Muskel-Stimulation (EMS) für Muskeltraining und -regeneration, Massage für Entspannung und Wohlbefinden

4 selbstklebende Elektroden inklusive:

1 große Elektrode (190 x 95 mm), 1 mittlere Elektrode (110 x 70 mm) und 2 kleinen Elektroden (50 x 50 mm)

Inkl. Fernbedienung zur Steuerung

Inkl. Elektrodenerweiterung

19 vorprogrammierte Anwendungen (TENS/EMS/Massage)

Intensität einstellbar über Gerät oder Fernbedienung

Countdowntimer

Sicherheitsabschaltung

Ausgangsspannung: max. 90 Vp-p (1000 Ohm load)

Ausgangsstrom: max. 90 mA p-p (1000 Ohm)

Ausgangsfrequenz: 2-290 Hz

Pulsbreite: 30-300 µs pro Puls

Impulsform: biphasische Rechteckimpulse

Freier Download der "beurer PainAway" Coaching App, App als Anwendungshilfe:

Vorschläge Elektrodenplatzierung, Erklärung zur Funktionsweise TENS/EMS

Gerät: Wiederaufladbarer Akku 250 mAh, 3.7 V

Fernbedienung: 2 x 1.5 V AAA Batterien (inkl.)

PZN: 16760612

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): Gerät: 72 x 50 x 14 mm, Fernbedienung: 127 x 49 x 24 mm


Produktgewicht: Gerät: ca. 38 g, Fernbedienung: ca. 78 g (inkl. Batterien)

5 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN Nr.: 4211125 64821 3

Art.-Nr.: 648.21

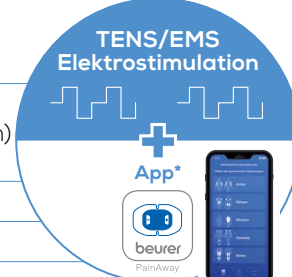

Medikamentfreie
Schmerzlinderung

648.21-EM70-2020-06-15-01_DS_DE_BEU Subject to errors and changes



Inklusive Fernbedienung zur Steuerung



1. Auswahl der Körperregion
2. Auswahl des Schmerzart- bzw. Muskelaufbauprogramms
3. Einstellung der Intensität



Folgende Features stehen in der App zur Verfügung:

- Hilfreiche Erklärungen zu den verschiedenen Anwendungsprogrammen des Beurer EM 70
- Nützliche Darstellungen zur korrekten Elektrodenpositionierung je Körperregion
- Eine Anleitung zur richtigen Anwendung des Beurer EM 70
- Zusätzliche Informationen rund um das Thema TENS & EMS
- Webshop Funktion zur einfachen Bestellung von Nachkaufartikeln in der deutschen und italienischen Version

Die Steuerung des Geräts erfolgt ausschließlich über die separate Fernbedienung, weshalb keine Verbindung von der App zum Gerät benötigt wird.



Die App ist in folgenden Sprachen verfügbar:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Spanisch
- Italienisch
- Türkisch
- Russisch
- Polnisch
- Niederländisch
- Portugiesisch
- Dänisch
- Schwedisch
- Norwegisch
- Finnisch
- Tschechisch
- Ungarisch
- Arabisch
- Slowakisch
- Chinesisch



648.21.EM70_2020-06-15_01_DS_DE_BEU Subject to errors and changes

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.



Synchronisierung mit
• iOS ≥ 12.0
• Android™ ≥ 8.0



Liste der unterstützten Geräte



Medikamentfreie
Schmerzlinderung